

ateliersduhautforez

ATF



créativité & innovation au service de la collectivité by ateliersduhautforez




Lit



Floore

LE MOBILIER MÉDICAL DEPUIS 1947

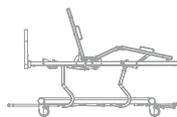

Floore

UN NOUVEAU LIT MÉDICALISÉ HÔTELIER

Le lit Floore allie harmonie des formes, élégance des matériaux et haute fonctionnalité technologique.

Il offre une solution adaptée à tout type de pathologie (personne désorientée, court séjour et long séjour...), résultat d'une éco-conception entre nos ingénieurs développement, les équipes commerciales AHF au plus près des besoins des patients dans les résidences seniors et une ergonomie pour le confort du personnel soignant au quotidien.

Il se caractérise par une position très basse et un nouveau concept de demi-barrière, pour offrir au résident, même très agité une sécurité optimale.

Entrez dans un nouvel horizon de confort!




ESTHÉTIQUE ET DESIGN

Le lit Floore et notre mobilier médical offrent aux résidents des chambres harmonieuses, génératrices de quiétude et contentement.

Son design hôtelier élégant est décliné avec 2 modèles de panneaux.

Notre nuancier de couleurs étoffé confère aux chambres des ambiances contemporaines.

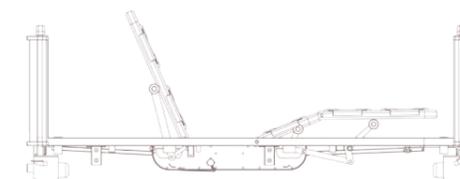

CONFORT ET BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS RENFORCÉS

- Une descente du lit facilitée grâce à une position basse du lit à 23 cm
- Une sécurité renforcée avec des 1/2 barrières ou barrières 3/4 pour éviter les chutes et rassurer les familles
- Une position fauteuil (proclive) pour un changement des points de compression
- Une aisance dans le lit (pour ne pas glisser au fond du lit) avec le système de pliure de genoux et relève jambes avec un seul bouton
- Des matelas standards ou thérapeutiques adaptables avec nos deux types de barrières, 3/4 ou demi-barrières



FACILITÉ DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

- Une accessibilité complète sous le lit pour accueillir une table à manger au lit ou un lève malade
- Une position proclive/déclive, pour repositionner le patient
- Un déplacement facilité du lit en latéral avec les 4 roues capotées libres double galet et un freinage aisé
- Une élévation électrique très rapide pour des soins à 73 cm
- Des commandes du lit accessibles grâce à la télécommande en front panel (mise en fauteuil, remise à plat, etc..)

AISANCE ET FIABILITÉ POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE ET BIO-MÉDICAL

Une désinfection simplifiée avec :

- Un sommier amovible avec des lattes identiques
- Aucun fil apparent
- Un choix de matériaux spécifiques (stratifiés, aluminium et bois)

Une maintenance technique simple et rapide avec :

- Une télécommande filaire déconnectable sans outil
- Option : une télécommande en front panel accessible facilement pour l'entretien
- Des finitions renforcées pour une utilisation du lit durable
- Une disponibilité permanente des pièces détachées

L'ambiance design
LUNA

Ligne essentielle qui interprète les tendances actuelles du design contemporain.

Son allure sobre et épurée allie douceur de vivre et rigueur expressive tout en répondant aux exigences de confort, de solidité et de sécurité.

Les détails en aluminium et la géométrie des meubles leur donnent une personnalité incontestable.



L'ambiance moderne
CORAIL

Ligne moderne et élégante qui crée une ambiance fraîche et contemporaine.

Ses formes douces et rondes ajoutées à l'utilisation d'inserts en aluminium procurent une sensation de sérénité et de bien-être.

Sa conception respecte les impératifs de solidité et d'utilisation grâce à une ouverture à 270° sur pivots sans charnière.



L'ambiance classique
SAGNERONDE

Ligne intemporelle, d'une modernité classique qui défie toutes les modes.

La finition d'excellence rappelle l'harmonie d'un contexte familial, confortable et rassurant.

La chaleur et l'authenticité du bois invitent à la détente, tout en combinant solidité et fonctionnalité avec des portes sur pivots, sans charnière, à ouverture 270°.

LIT À HAUTEUR VARIABLE FLOORE

Sécurité, fiabilité, confort, ergonomie

1 | COMMANDE MANUELLE

Une télécommande filaire pour le réglage des différentes positions, assurant une autonomie supérieure au résident. Déconnectable à tout moment pour assurer une sécurité maximale.

Option: Télécommande intégrée dans le panneau, accessible en permanence pour le personnel soignant.

2 | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE LA LONGUEUR

- Une position basse à 23 cm pour un alitement en sécurité
- Une position haute à 73 cm pour effectuer des soins le dos droit et éviter tout risque de lombalgie.
- Une longueur adaptable avec une rallonge de sommier pour les personnes de grande taille

3 | MANŒUVRABILITÉ ET FREINAGE RENFORCÉS

4 roues capotées libres double galet pour un freinage et un déplacement facilités. Accessible à n'importe quelle hauteur du lit. Déplacement latéral aisé.



4 | SOMMIER

Un couchage confortable avec un sommier amovible à lattes identiques ou en option un sommier compact.

5 | BARRIÈRE LATÉRALE

Toujours plus de sécurité et d'autonomie pour les résidents, de confort d'utilisation pour le personnel soignant, avec nos 2 concepts de barrières :

- Demi-barrière
- Barrière 3/4

Découvrez en page 8 les avantages de nos barrières dernière génération.

6 | CHÂSSIS

Un châssis libre en dessous pour permettre le passage d'une table à manger au lit ou d'un lève malade et faciliter la désinfection.



- Un design hôtelier attirant pour les futurs résidents.
- De très faibles coûts d'entretien ou de maintenance.



LES BARRIÈRES


Prévenir les chutes et faciliter l'autonomie



Barrière 3/4

Conforme à la norme CEI 60601-2-52 prophylaxie des chutes

- Elle permet au résident de sortir du lit en situation d'urgence.
- Possibilité de rajout d'un complément de barrière (accessoire) pour une sécurité optimale.
- Déblocage de la barrière facilité par un simple bouton.
- 2 positions :
 - une position matelas standard
 - une position matelas thérapeutique

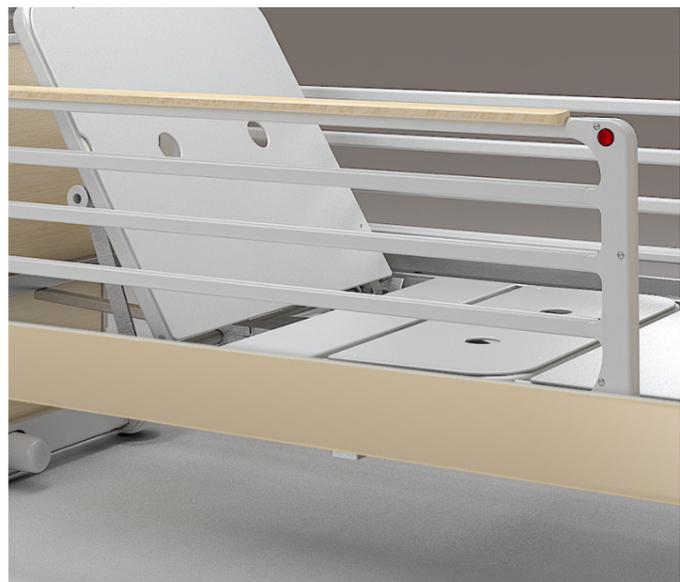

LES 5 POSITIONS CONFORT ET SÉCURITÉ

Position basse.
Sécurité pour le patient.
23 cm

Position haute pour réaliser les soins.
73 cm

Position décline.
Position d'urgence.
Permet de repositionner le résident en tête de lit.

Position Fowler
Favorise le soulagement des zones de pression pour les affections artérielles ou veineuses lors d'alitement prolongé

Position fauteuil
Pour le bien être du résident, permet le changement des points de compression (prévention des escarres)
Facilite la vie sociale du résident

Verrouillage soignant

Toutes les positions de soin ou de confort sont disponibles directement avec la télécommande filaire, simple d'utilisation. Toujours accessible pour le résident ou le personnel soignant avec le support flexible (en accessoire).
Déconnectable facilement.

Demi-barrière

Conforme à la norme CEI 60601-2-52 (prophylaxie des chutes)

- Elle offre un retour à l'autonomie du résident
- Elle sécurise le patient alité.
- Ses deux barrières offrent 4 possibilités d'utilisation au personnel soignant :



Niveau 1 : Protection légère.

Les 2 demi-barrières peuvent être levées au cran numéro 1 pour offrir une protection appréciable sans obstacle à la vision



Niveau 2 : Protection et autonomie

La demi-barrière latérale actionnée permet au résident de sortir du lit en toute quiétude




Niveau 3 : Sécurisation totale

Les 4 demi-barrières latérales sont entièrement levées.



Niveau 4 : Thérapeutique

Possibilité d'intégration d'un matelas thérapeutique

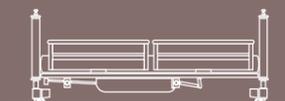


Poignée de levage



Zone d'action pour baisser la barrière



LES DONNÉES TECHNIQUES

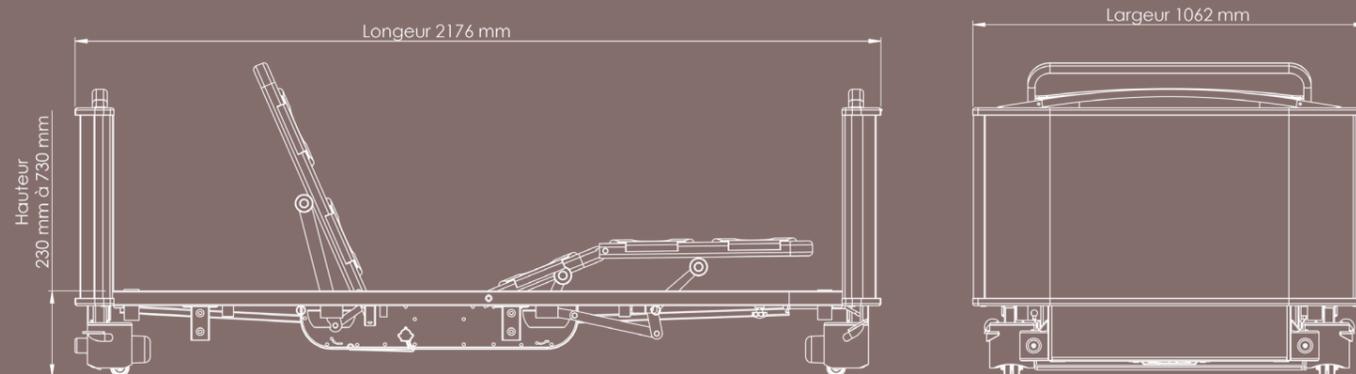

Lit à hauteur variable avec système d'élévation par colonnes réf. FLOORE

- | | |
|--|---|
| Hauteur minimum : 230 mm | Capacité maximale : 200 kg |
| Hauteur maximum : 730 mm | Tension alimentation : 240 V - 50 Hz |
| Réglage décline-procline maximum : 20° | Tension en service : 24 VCC |
| Réglage relève-buste maximum : 70° | Indice de protection IP : IPX4 |
| Translation du relève buste : 80 mm | Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm |
| Poids : 100 kg | Classe électrique : 1B |

Nos matériels sont des dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE.

- Ils répondent aux normes :
- NF EN 60601-1
 - NF EN 60601-2-52
 - NF EN 60601-1-2

LES ACCESSOIRES

Les accessoires barrières



Paire de barrières pliantes 3/4
réf. LSUGH2BPLTX06



Jeu de 4 1/2 barrières de lit
RÉF. LSUGH2BPLTX01/2F



Paire de longs pans sur châssis
réf. TOSULPAF2



Paire de protections mousse pour barrières
réf. LSUGH2BPLMC



Décor bois sur barrières
réf. LSUGH2BPLMC



Complément de barrière
réf. 20113037

Les autres accessoires



Poignée de préhension
réf. 20113030



Tiges porte serum 2 crochets
réf. LSUGH PSTAL2 NM



Flexible télécommande
réf. LSUGHFL



Batterie
réf. LSUGH BATD



Tiges porte serum 4 crochets
réf. LSUGH PSTAL4 NM



Porte sac à urine
réf. 20113011



Potence
réf. LSUGHPL



Poignée enrouleur sur potence
réf. LSUGH PLPE

Pour plus de renseignements, contactez le service commercial AHF au 04 77 50 05 13

LES OPTIONS



Télécommande filaire avec toutes les fonctions
réf. LSUGHSCFL
• Très bonne préhension + repérage des fonctions facilité grâce aux couleurs.
• Option comprenant télécommande avec relève buste, relève jambes/cuisses et hauteur variable.
• Télécommande Front Panel dans le pied du panneau regroupant toutes les fonctions du lit + condamnations sélectives du lit.



Sommier compact blanc
réf. LSUGHDPICF
• Épaisseur 6 mm imputrescible



Front panel soignant
réf. LSUGHBOITP
• Position nuit automatique
• Position fauteuil automatique
• Verrouillage sélectif des fonctions
• Accessibilité permanente pour le personnel soignant



Veilleuse sous le lit
réf. LSUGHVEIL
• Lumière projetée au sol pour repérage du résident (non représenté sur le lit)

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR AHF



QUALITÉ & FIABILITÉ

67 ans d'expérience.
Nos lits et mobiliers font référence sur le marché français



ÉCO CONCEPTION

AHF s'engage pour rendre l'environnement plus propre et ce dès la conception de nos produits.



R&D & DESIGN

Notre laboratoire R&D et notre équipe de designers conçoivent des produits esthétiques et ergonomiques pour le confort de vos patients et de votre personnel soignant.



LIVRAISON & INSTALLATION

- Transport assuré par nos soins
- Installation & montage par nos techniciens
- SAV
- Formation

LES NUANCIERS

Les stratifiés



Woodline café
H1428 ST22



Frêne de Lyon sable
H1298 ST22



Hacienda blanc
H3078 ST22



Bouleau de Mainau
H1733 ST9



Poirier de Lindau
H3113 ST15



Mérissier Romana
H1615 ST15



Chêne Nebraska gris
H3332 ST10




Hêtre de Lyons
Chocolat
H1599 ST15



Chêne Nebraska
naturel
H3331 ST10



érable
H1521 ST15

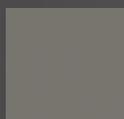

Basalte
U730 ST9




Reflet
U400 ST9



Orange
U332 ST15




Cerise
U823 ST15

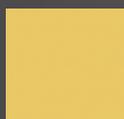


Abelle
U146 ST15



Sencha
U634 ST15

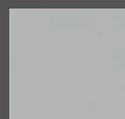


Aluminium
F509 ST2

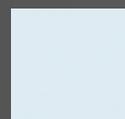

Bleu polaire
U633 ST15



Horizon
U522 ST15

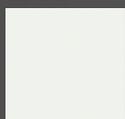

Blanc craie
W908 ST2/SM

Les bois



Blanchi



Naturel



Acajou



Wenghé



Mérissier

Retrouvez l'ensemble de nos univers sur

WWW.GROUPE-AHF.FR



AHF Ateliers du Haut Forez
ZAC La Gravoux - 42380 LA TOURETTE

Tél. +33 (0)4 77 50 05 13
Fax +33 (0)4 77 50 06 05

contact@groupe-ahf.fr



créativité & innovation au service de la collectivité by **ateliersduhautforez**

LE MOBILIER MÉDICAL DEPUIS 1947

