

BENOIT SYSTEMES



MINOTOR²



WWW.BENOITSYSTEMES.COM



LE MINOTOR²


Le Minotor² est une motorisation légère destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.

Il est fabriqué sur mesure selon la largeur d'assise en France par Benoit Systèmes depuis 1994. Ce système vous offre la possibilité de motoriser très facilement en quelques secondes votre fauteuil roulant.



LE MINOTOR² S'INSTALLE EN MOINS DE 15 SECONDES,
IL SE CONDUIT AVEC UN JOYSTICK.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

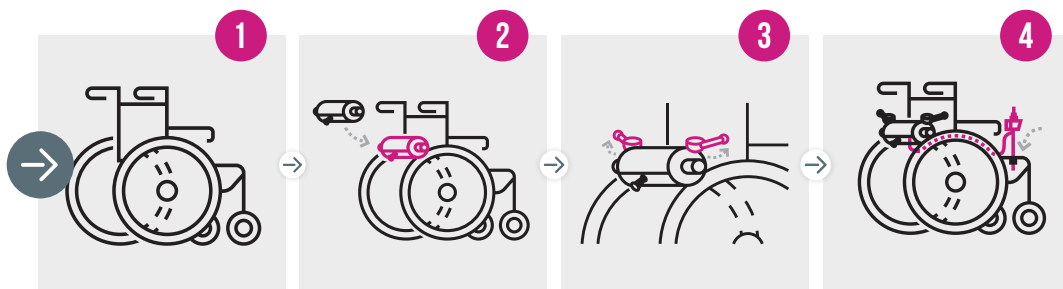


VOTRE FAUTEUIL ROULANT

POSE DE LA MOTORISATION

BLOCAGE DES MANETTES

POSE DU JOYSTICK

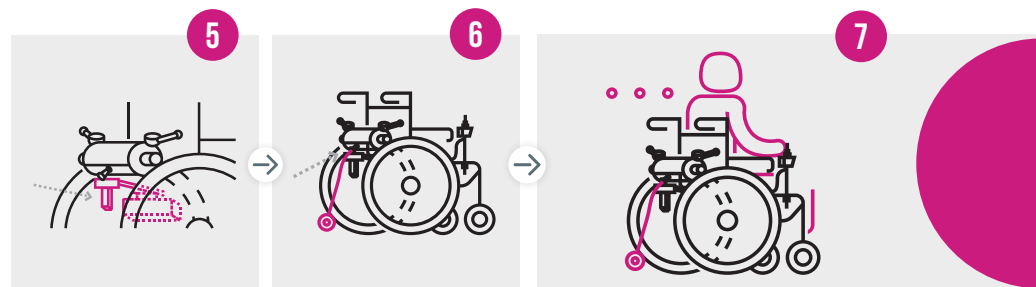

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

INSERTION DE L'ANTI-BASCULE

EN ROUTE !

LE +

Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil roulant

Jean-Claude
Utilisateur depuis 2016 - atteint de
sclérose en plaques depuis 2003

“ Mon Minotor² me sert toute l'année à faire les courses avec mon épouse, à me balader dans les centres commerciaux et aux beaux jours à me promener dans les vide-greniers et les marchés. Depuis que j'ai mon Minotor² je suis plus autonome, je n'ai plus besoin d'être accompagné tout le temps.



LES ATOUTS DU MINOTOR²



LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE
EN AVION*



DISCRET ET
SOBRE



TOUT
CHEMIN



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

* La batterie 12Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.



Le Minotor² est
LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE



“ Avec le MINOTOR² osez
de nouveaux horizons ”

LE MINI MINOTOR²



Le Minotor² pour les plus petits.

Le Mini Minotor² est modulable et s'adaptait aux divers fauteuils (croissance de l'enfant, changement de type de fauteuil).

Le fauteuil ainsi équipé restera très facile à embarquer en voiture.

Grâce à lui l'enfant aura la possibilité de rouler aisément sur toutes sortes de terrains (pentes raides, herbe, graviers). La marche arrière l'aidera à franchir les obstacles les plus importants tels que petites marches ou trottoirs.

LE MAXI MINOTOR²



Le Minotor² s'adapte et devient Maxi Minotor².

Le Maxi Minotor² est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 130 kg.

Équipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères.

Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants quelle que soit la largeur et grâce à la batterie Lithium de 18 Ah vous avez une autonomie d'au moins 20 km.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos motorisations sont compatibles avec la plupart des fauteuils roulants manuels pliants ou fixes à partir de 28 cm d'assise.

Consultez nous !

	Poids maximum de l'utilisateur	Poids maximum admissible du dispositif	Poids de la motorisation
Minotor²	120 kg	150 kg	8,8 kg
Mini Minotor²	120 kg	150 kg	7,4 kg
Maxi Minotor²	240 kg	260 kg	16 kg

Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Moteur Maxi Minotor²	4 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle max franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente maximale de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

Nos motorisations existent en



LA BATTERIE 12AH EST COMPATIBLE AVEC LES RÈGLES IATA EN VIGUEUR POUR LES VOYAGES AÉRIENS

Modèle	Poids	Autonomie
- Batterie Lithium	- 3,85 kg	- 15 à 18 km



D'autres options et informations sont disponibles sur notre site internet