



NEON²



RÉGLABLE SELON VOS BESOINS. POUR UNE VIE ACTIVE

Ce fauteuil polyvalent offre un maximum de possibilités. Compact, il regorge de possibilités et affiche un design caractéristique et attrayant. Grâce à son châssis par croisillon et à son dossier rabattable, le Quickie Neon² se replie facilement pour devenir très compact. De plus, sa légèreté (à partir de 7.8* kg), fait du Neon² le fauteuil pliant s'adaptant à toutes les circonstances avec des résultats convaincants à tous les niveaux.

// POSSIBILITÉS MAXIMALES DE RÉGLAGE

Le design du fauteuil roulant vous permet de régler à souhait la hauteur et l'angle d'assise ainsi que le centre de gravité, sans devoir effectuer de modifications radicales. L'angle du dossier est simple à régler, tout comme sa hauteur et sa toile réglable en tension. Les possibilités d'adaptation de votre Neon² vous permet de toujours obtenir les meilleures conditions de conduite, que vous souhaitiez une conduite plus stable ou plus active.

L'assise du Neon² est calée entre les éléments latéraux du châssis, ce qui confère au fauteuil roulant une rigidité incomparable pour un fauteuil roulant à châssis pliant !

Grâce à son châssis-hémi, le Neon² présente une faible amplitude de hauteur de siège (à partir de 35 cm), et peut facilement être déplacé avec les pieds.

*Cette valeur peut varier selon la configuration.

// ADAPTATEURS DE PLAQUE D'AXE

La plaque d'axe standard (RCG: 2 - 12 cm) permet un réglage aisé du centre de gravité, tandis que la plaque d'axe légère (RCG: 5 - 12 cm) peut être montée inversée pour obtenir plus de positions de hauteur d'assise.



Plaque d'axe standard



Plaque d'axe légère



1. Réglage du centre de gravité (RCG)
2. Réglage de l'inclinaison du dossier
3. Réglage de la hauteur d'assise à l'arrière

EUN DESIGN STYLÉ AVEC UNE TOUCHE PERSONNELLE !

La vaste gamme de couleurs de châssis, qui constituent un vrai plaisir des yeux, vous permet de personnaliser encore plus le Neon² ! Vous pouvez également choisir entre 5 styles anodisés, qui ne passent pas inaperçus, pour vos fourches et vos roues avant. Vous pouvez aussi apporter une touche de couleur à votre toile de dossier EXO Evo. Egalement disponible, un large assortiment d'options et d'accessoires.

// CRÉEZ VOTRE PROPRE LOOK PLEIN DE STYLE, AVEC DES FOURCHES AVANT ET DES ROUES AVANT DE COULEUR

Les fourches avant ultra-légères Carbotecture peuvent être fournies en cinq couleurs élégantes : argenté, bleu, rouge, orange et noir. Elles peuvent être éventuellement combinées avec des roues avant anodisées de la même couleur !



Réglage de la hauteur d'assise



// SFOURCHE AVANT SINGLE ARM

Design robuste et moderne, pour un look élégant et séduisant.

// TOILE DE DOSSIER EXO, CONFORTABLE ET CHIC

Toile de dossier réglable en tension, disponible dans sa version en nylon (EXO Evo) et sa version aérée (EXO Evo Pro). Toile de dossier comportant deux espaces de rangement, dont l'un peut être fermé par une fermeture éclair ; 5 couleurs au choix : noir, argenté, orange, bleu et rouge.



// PERSONNALISEZ VOTRE NEON2 POUR UN DESIGN STYLÉ

Tout comme pour les fourches et roues avant anodisées, vous pouvez donner une touche de couleur supplémentaire au moyeu et à la jante des roues arrière ! Les teintes anodisées disponibles sont les suivantes : rouge, orange et bleu.





// CRASH TESTÉ AVEC SUCCÈS

Le Neon² est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points, ce qui permet d'utiliser le fauteuil en tant que siège lors du transport de l'utilisateur.



// MAIN-COURANTES ELLIPSE

La bande caoutchoutée recouvrant les main-courantes ergonomiques de forme ovale vous assure une prise maximale.



Les innombrables possibilités du Quickie Neon² en font le fauteuil roulant châssis pliant parfait en toute situation. Il propose un vaste assortiment de couleurs de châssis, options, accessoires et possibilités de réglage.



// FREINS COMPACTS

Ergonomiques, réglables et simples à utiliser. Convient également aux personnes aux fonctions manuelles limitées.



// GARDE-BOUE EN CARBONE

Les garde-boue en carbone pèsent environ 330 gr. par paire !
Les garde-boue en aluminium les plus légers pèsent 500 gr.



// DIFFERENTES POIGNÉES DE POUSSÉE

Différentes poignées de poussée disponibles : longueur standard, rabattables (voir illustration) ou réglables en hauteur.



// DOSSIER RABATTABLE

Plier aisément le fauteuil roulant en un paquet de petite dimension, facilite encore plus le transport du Neon2.



// REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLES

Les repose-pieds escamotables (70° ou 80°) sont amovibles et équipés de palettes en composite, (dans la teinte du châssis) ou en carbone léger.




// REPOSE-PIEDS RABATTABLE

Le repose-pied rabattable offre un espace important pour les transferts du ou vers le Neon2. Le palette existe en composite, en aluminium ou en carbone.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	300 - 500 mm	Repose-pieds :	70° of 80°
Profondeur d'assise :	340 - 500 mm	Centre de gravité :	20 - 120 mm
Hauteur du siège - avant :	350 - 570 mm	Carrossage :	0°, 2° of 4°
Hauteur du siège - arrière :	330 - 530 mm	Charge de transport à partir de :	7.8 kg
Hauteur du dossier :	250 - 475 mm	Poids à partir de* :	11.5 kg
Inclinaison du dossier :	-15° - +13°	Charge maximale :	140 kg
Longueur de jambe :	220 - 510 mm	Crashtest	•
Angle d'assise :	0 tot 110 mm		

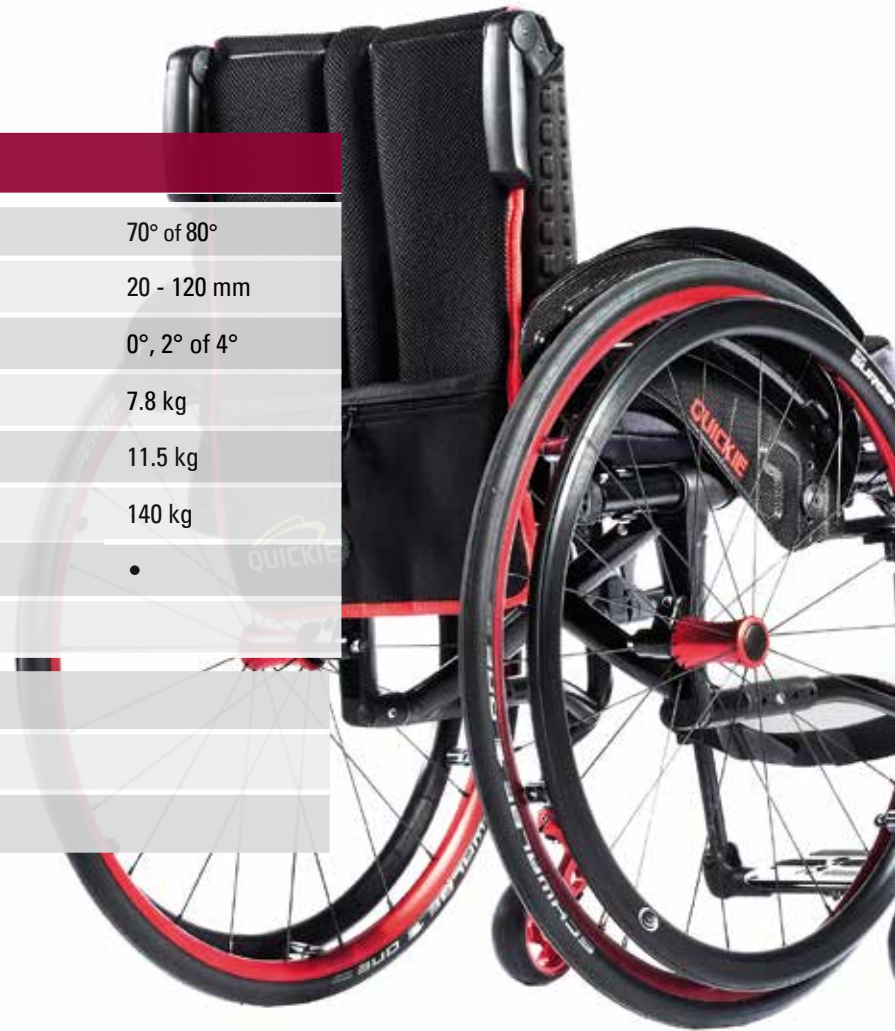

Différents coloris de châssis, mains courantes et jantes.

Les toiles de dossier EXO et EXO Pro sont disponibles en différentes couleurs.

Large choix d'options et d'accessoires fonctionnels et modernes lifestyle.

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au bon de commande.

Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d'inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

• Le Quickie Neon2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

*Cette valeur peut varier selon la configuration.

