

SÉRIE ELITE²

Sécurité, fiabilité
& confort



WHERE YOU WANT TO BE.

Série Elite²
Scooters



Elite² XS



Elite² Plus

SÉRIE ELITE²

SÉCURITÉ, FIABILITÉ & CONFORT

Au fil des ans, les scooters Sterling ont prouvé qu'ils étaient des compagnons de voyage sûrs et fiables. La nouvelle série Elite² noire rehausse ce standard avec encore plus de confort, de sécurité et de fiabilité. D'autre part, les scooters Elite² présentent un excellent rapport qualité-prix en raison de leur durée de vie prolongée et de composants faciles à entretenir.

La série Elite² se caractérise par une commande légère et souple grâce à la commande de série ergonomique, actionnée par la main ou le pouce. Le panneau de commande et son écran sont clairement structurés et faciles à utiliser. Le confort du siège avec support lombaire plus le réglage de la position du siège et de l'angle de la colonne de direction assurent une bonne posture assise.

Avec une vitesse maximale de 15 km/h, l'Elite² est le compagnon de voyage idéal pour un voyage confortable en toute sécurité.





Un maximum de sécurité

- Éclairage LED intégré à haute luminosité avec marquage de conformité CE.
- Levier de frein rouge bien visible à identification intuitive.
- Le levier de frein a une réaction directe grâce à la fonction d'arrêt électronique.
- Système de frein secondaire avec fonction d'arrêt électronique.
- Frein de stationnement puissant.

ELITE² XS

- Conduite confortable grâce aux amortisseurs arrière réglables.
- Contrôle ergonomique à la main ou au pouce, écran LCD et boutons soft-touch.
- Poignée tournante d'accélération 'twistgrip' et pédale d'accélérateur en option.

ELITE² Plus

- Conduite encore plus confortable grâce aux amortisseurs avant et arrière réglables.
- Contrôle ergonomique à la main ou au pouce, écran LCD et boutons soft-touch.
- Poignée tournante d'accélération et pédale d'accélérateur en option.
- Volant rectangulaire, comme un volant de voiture.

PNEUS HYBRIDES


Afin de réduire au minimum le risque de crevaisons, les scooters de la série Elite² ont des pneus hybrides solides. Cela signifie : moins d'appels au service de réparation et des sorties en toute confiance.

En outre les pneus hybrides amortissent les irrégularités de la route pour une conduite agréable, souple et régulière.

Profitez d'une autonomie maximale avec la série Elite².

Une large gamme d'options et d'accessoires permet d'adapter les scooters de la série Elite² à ses besoins et préférences.

Bandage plein Chambre à air

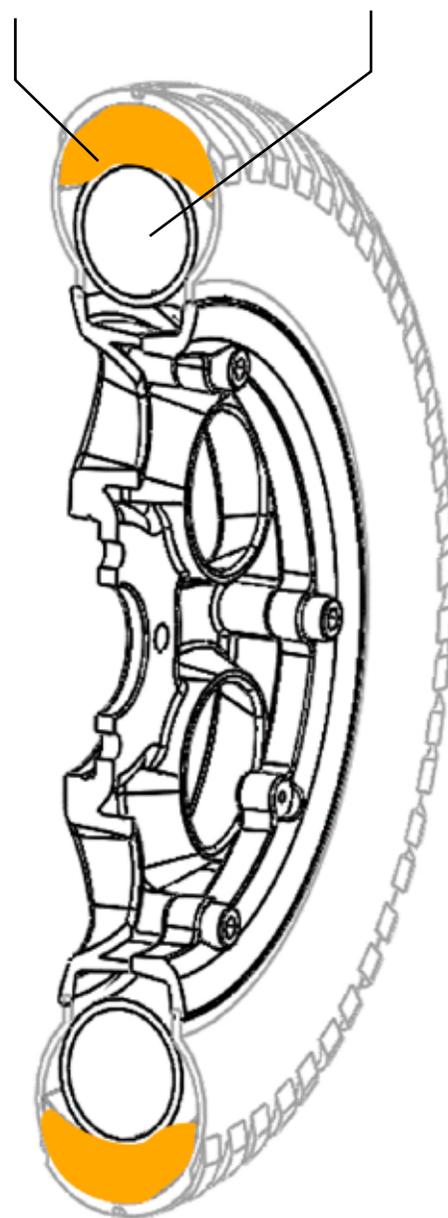



CARACTÉRISTIQUES



Levier de frein rouge, bien visible et identifiable. Priorité à la sécurité !

Carénage noir élégant, coloré de part en part pour camoufler les petites égratignures.

Pare-chocs standard intégral, empêche les dommages à l'avant du scooter (survenant en heurtant des portes par exemple)

Pneus hybrides souples, moins de crevaisons, plus confort de route.



ÉCRAN LCD

Les scooters de la série Elite² disposent de poignées confortables et d'une commande ergonomique et intuitive, actionnée à la main ou au pouce. L'angle des poignées peut être ajusté pour créer une posture de conduite confortable. Le panneau de commande est clairement structuré, facile à utiliser et pourvu d'un écran indiquant le niveau de batterie (très fiable), la vitesse, le nombre d'heure et le kilométrage parcouru.



ÊTRE BIEN ASSIS

Une bonne posture assise est indispensable pour la sécurité et le confort de conduite. C'est pourquoi les scooters Elite² offrent de multiples options de réglages qui permettent d'adapter le scooter en fonction de ses besoins et préférences.

- Inclinaison du dossier réglable
- Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
- Support lombaire complètement ajustable
- Glissière de siège et mécanisme de pivotement pour monter et descendre du scooter avec aisance



SE DÉPLACER EN TOUT CONFORT

Avec un dossier extra haut et un support lombaire réglable, le siège de la série Elite² apporte confort et soutien. L'inclinaison du dossier est facile à régler et la distance au volant peut être ajustée avec précision. Il suffit de régler le siège vers l'avant ou l'arrière et d'ajuster l'angle de la colonne de direction. Le but est d'éviter toute tension sur les épaules alors que les mains reposent détendues sur le volant. Il y a suffisamment d'espace pour trouver aussi une position confortable des pieds et des jambes. Pour monter et descendre du scooter en toute sécurité et confort, le siège pivote à 360° et les accoudoirs se relèvent facilement.



- Colonne de direction réglable



- Siège pivotant à 360° pour monter / descendre aisément



- Position du siège réglable vers l'avant / l'arrière



- Accoudoirs relevables



SÉRIE ELITE²



DESIGN ÉLÉGANT SÉCURITÉ MAXIMALE





Se déplacer en toute sécurité

Pour assurer une bonne visibilité, les scooters Elite² ont un éclairage intégré : lampes LED avant et arrière, clignotants et feux stop. De plus, ces scooters offrent en standard des garde-boue, un frein de stationnement supplémentaire, des roulettes anti-bascule et un pare-chocs avant. Les scooters Elite² sont robustes, très résistants et approuvés pour les utilisateurs jusqu'à 175 kg.



SÉRIE ELITE²

Sécurité, fiabilité & confort





DONNÉES TECHNIQUES

Série ELITE ²	ELITE ² PLUS	ELITE ² XS
Type	3-roues	3-roues
Couleur	Noir mat	Noir mat
Longueur totale	139 cm	139 cm
Largeur totale	65 cm	67 cm
Profondeur d'assise	46 cm	46 cm
Largeur d'assise	47,5 cm	47,5 cm
Hauteur d'assise	44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds	44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds
Hauteur du dossier	51 cm	51 cm
Réglage de l'inclinaison du dossier	Oui	Oui
Réglage du siège (glissière horizontale)	Oui	Oui
Vitesse maximale	15 km/h	15 km/h
Autonomie maximale	44 km	44 km
Pente maximale	15° avec 175 kg	15° avec 175 kg
Rayon de braquage	280 cm	280 cm
Pneus	Hybrides, pneumatiques ou solides	Hybrides, pneumatiques ou solides
Diamètre roue avant	14"	14"
Diamètre roues arrière	14"	13"
Poids total (sans batteries)	94 kg	86 kg
Poids total (avec batteries)	140 kg	132 kg
Batteries	60 Ah	60 Ah
Poids maximum de l'utilisateur	175 kg	175 kg

