



# PLATINUM:

Le bon choix



# Pour tous types d'escaliers

## L'Horizon de Platinum

Un monte escalier Droit complet.

### Descriptif du produit standard:

- Siège Ergo révolutionnaire
- Siège et assise complètement ajustable
- Siège pivotant automatique
- Manette de contrôle du repose pieds relevable
- Siège ajustable en fonction de la hauteur du repose pieds
- Repose pieds réglable latéralement
- Poids maximum 140 kg
- Monorail en aluminium anodisé
- Angle du rail entre 25 et 62 °
- Cadran d'affichage numérique des diagnostics
- Télécommande à fréquence infra rouge
- Ceinture de sécurité rétractable
- Manette de contrôle ergonomique

### En Option:

- Rail relevable électrique
- Platinum Horizon d'Extérieur

# Platinum à la solution.



Platinum, vendu partout dans le monde.

## Le Courbe de Platinum

Parfaite fabrication sur mesure.

### Descriptif du produit standard:

- Double rail en acier
- Déplacement silencieux en douceur
- Manette de contrôle ergonomique
- Virage serré interne sur 200 mm de rayon
- Installation proche de l'escalier
- Chaise Ergo Révolutionnaire
- Cadran d'affichage numérique des diagnostics
- Ceinture de sécurité rétractable
- Télécommande à fréquence infra rouge
- Poids de l'utilisateur max de 120kg.

### En Option:

- Siège pivotant automatique et repose pieds électrique
- Manette de contrôle du repose pieds
- Cache pieds pour les pieds du rail
- Télécommande à fréquence radio
- Siège pour poids de 160 kg.


Argentine  
Australie  
Autriche  
Belgique  
Brésil  
Canada  
Chine  
Croatie  
Chypre  
Danemark  
Finlande  
France  
Allemagne  
Grèce  
Hollande  
Inde  
Irlande  
Israël  
Italie  
Lettonie  
Luxembourg  
Malaisie  
Malte  
Nouvelle Zélande  
Norvège  
Oman  
Philippines  
Pologne  
Portugal  
Arabie Saoudite  
Afrique du Sud  
Espagne  
Suède  
Suisse  
Turquie  
Uruguay  
USA  
Royaume-Uni

# Utiliser le Courbe de Platinum facilement



Avec une capacité jusqu'à 160 kg.

Notre rail permet de réaliser un virage intérieur très serré, ce qui nous permet de nous adapter finement à votre escalier.

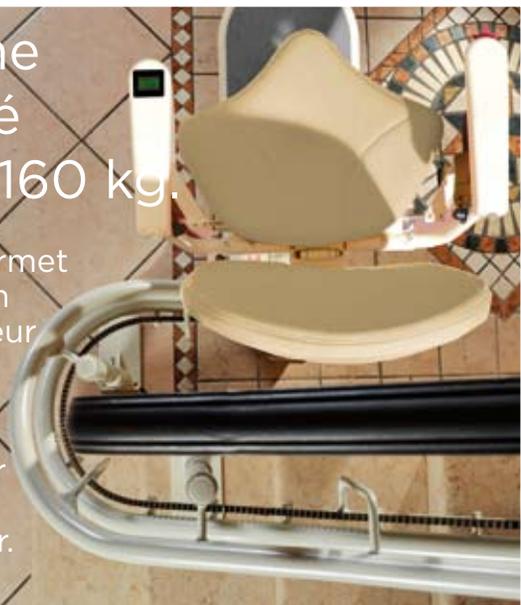


Dépliez les accoudoirs et l'assise du siège, baissez le repose-pied; votre fauteuil monte escalier est prêt à être utilisé.

1

**2** Asseyez-vous sur la chaise ERGO révolutionnaire, qui peut être entièrement ajustée à votre taille.

**3** Servez-vous de la manette ergonomique pour faire monter ou descendre le fauteuil monte-escalier.

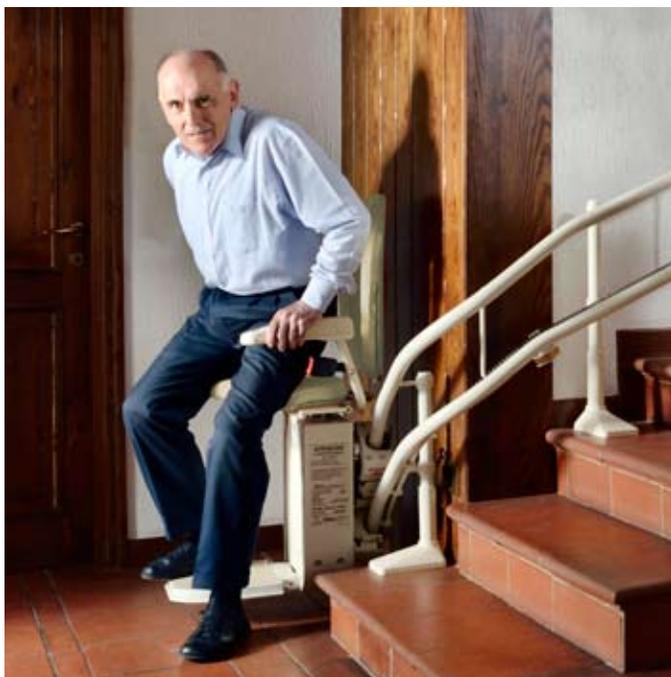

**4** Vous pouvez faire pivoter le fauteuil en haut de l'escalier pour vous permettre d'y monter ou d'en descendre facilement et en sécurité.

**5** Le monte escalier peut être garé à n'importe quel endroit de l'escalier, ce qui laisse de la place aux autres membres de la famille.



# Utiliser le Droit de Platinum facilement



Dépliez les accoudoirs et l'assise du siège, baissez le repose-pied ; votre fauteuil monte escalier est prêt à être utilisé.

1

**2** Asseyez-vous sur la chaise ERGO révolutionnaire, qui peut être entièrement ajustée à votre taille.

**3** Servez-vous de la manette ergonomique pour faire monter ou descendre le fauteuil monte-escalier.




**4** Vous pouvez faire pivoter le fauteuil en haut de l'escalier pour vous permettre d'y monter ou d'en descendre facilement et en sécurité.

**5** Le monte escalier peut être garé à n'importe quel endroit de l'escalier, ce qui laisse de la place aux autres membres de la famille.




# Découvrez nos fonctionnalités uniques

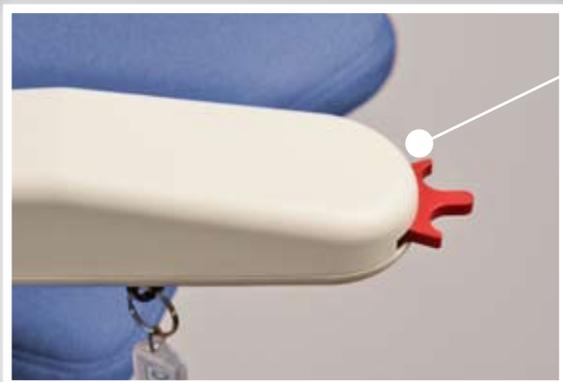

## Manette Ergonomique

Sa forme crantée permet de la tenir bien en main (comme un bouton ou un levier) pour un pilotage du fauteuil dans une position naturelle et confortable, même en mobilité réduite.

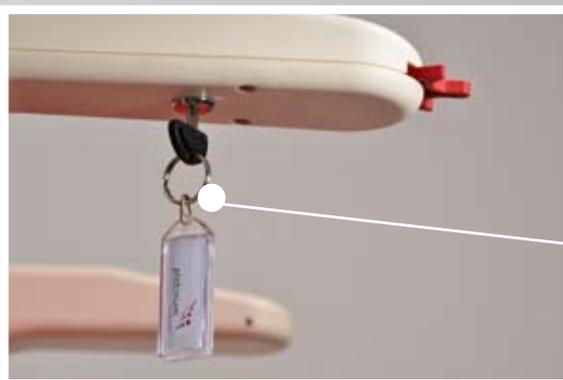

## Interrupteur à clé

Il est situé sous l'accoudoir pour éviter une utilisation accidentelle du fauteuil.



## Manette du pivotement du siège

Pour vous pivoter en haut de l'escalier il vous suffit de soulever manuellement le levier vers le haut. Option pivot motorisé qui fonctionne avec la manette ergonomique.



## Siège ERGO plus

Conçu pour améliorer la position des jambes en position assise.



### **Cadran d'affichage numérique**

Il donne des informations sur le produit et affiche d'éventuels diagnostics de panne en temps réel.

### **Ceinture de sécurité rétractable**

Pour plus de sécurité lors de vos déplacements.

### **Manette indépendante pour relever le repose-pied**

Elle permet de remonter ou rabaisser le repose-pied, sans que vous ayez à vous baisser. Permet un transfert plus facile pour les personnes en fauteuil roulant.

### **Bords de Sécurité sensibles**

Pendant le déplacement de votre Fauteuil Monte escaliers ceux-ci arrêtent le monte escalier en cas d'obstacles dans l'escalier

### **Siège Classic HD**

Une option unique au Courbe de Platinum conçu avec un poids de l'utilisateur allant jusqu'à 160 kg.



Un produit fabriqué sur mesure qui réponds à vos besoins



## Couleur des sièges.

Qualité des matériaux et finitions faits sur mesure.



**Beige** *Vinyle*



**Bleu** *Vinyle*



**Rouge** *Vinyle*



**Gris** *Vinyle*


Apprécier le siège unique de Platinum complètement ajustable.



**Dossier ajustable**

**Siège et assise ajustable**

En haut, en bas, en arrière et en avant

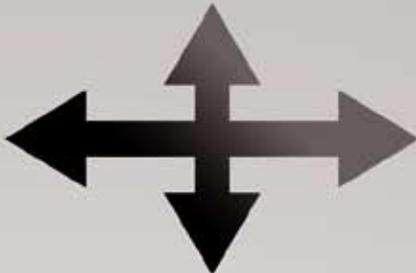

**Accoudoirs ajustables**

Simple, facile à ajuster pour tout le monde



**Faites descendre le repose pieds**

indépendamment des accoudoirs.

# Conçu en pensant à vous



**Rail relevable pour l'Horizon**  
Utilisé en recours contre tout obstacle en bas de l'escalier.

## Télécommandes

Deux sont livrées avec le monte escalier, vous permettant de l'appeler depuis là où vous êtes.



## Pivotement automatique

Pour faire pivoter le fauteuil en haut de l'escalier sans aide.


## Et facile à utiliser

- Délai avant la mise en route pour éviter une manipulation non intentionnelle
- Choix parmi 4 couleurs de siège ; possibilité de changer la couleur.
- Fonctionne sous batterie et donc continuera à fonctionner même en cas de coupure de courant
- Poids de l'utilisateur allant jusqu'à 160kg pour le Courbe de Platinum et 140kg pour le Droit de Platinum, l'Horizon.


Aussi pour une utilisation extérieure.

## En toute sécurité

- L'Horizon d'extérieur est livré avec le siège Ergo, le pivot automatique et la manette pour relever le repose-pieds en standard
- Angles des rails de 25 ° à 62 °
- Carte mère d'extérieure étanche
- Lubricant spécial étanche de protection du rail
- Egalement livré avec une housse de protection totalement étanche

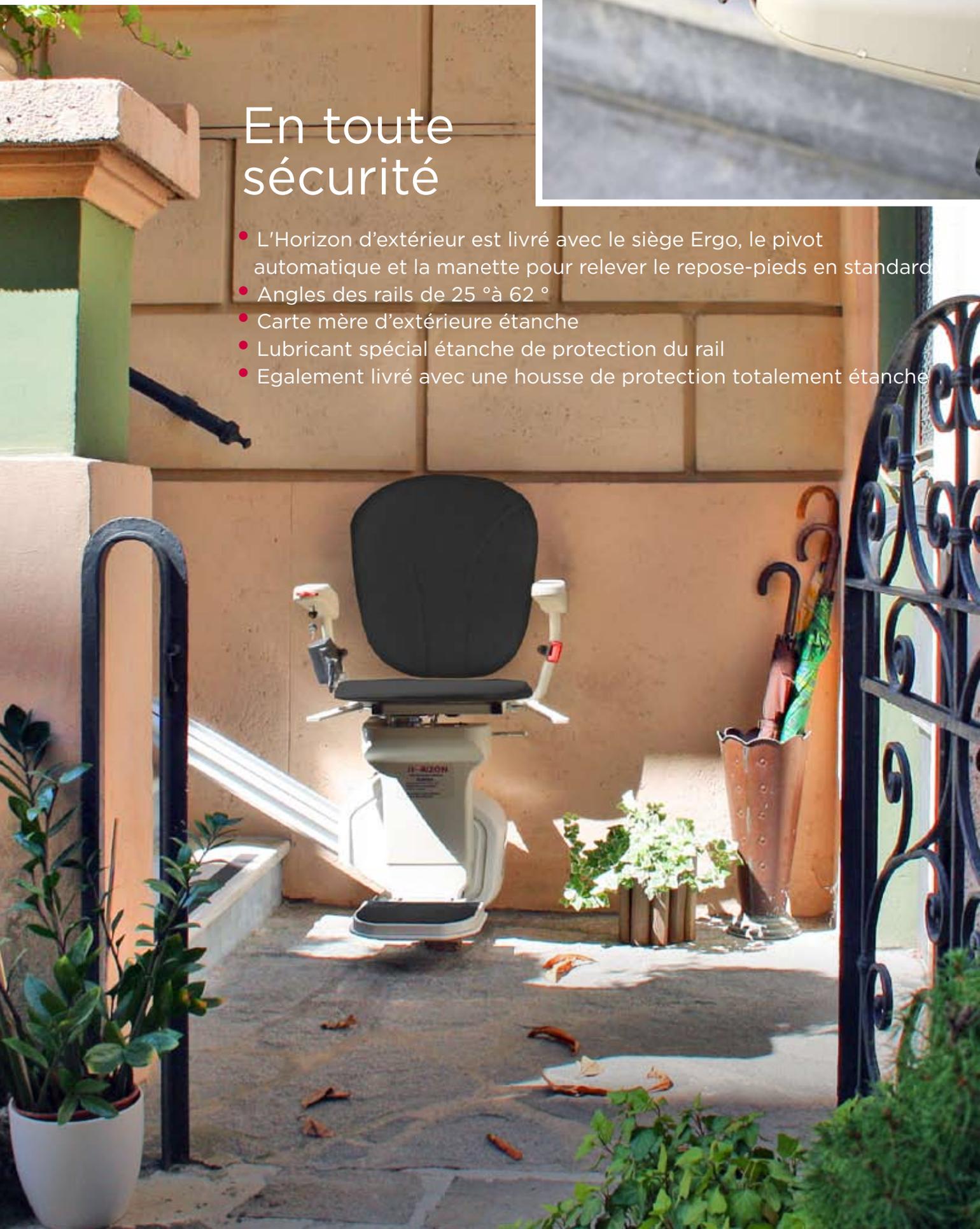




# Courbe ou droit,

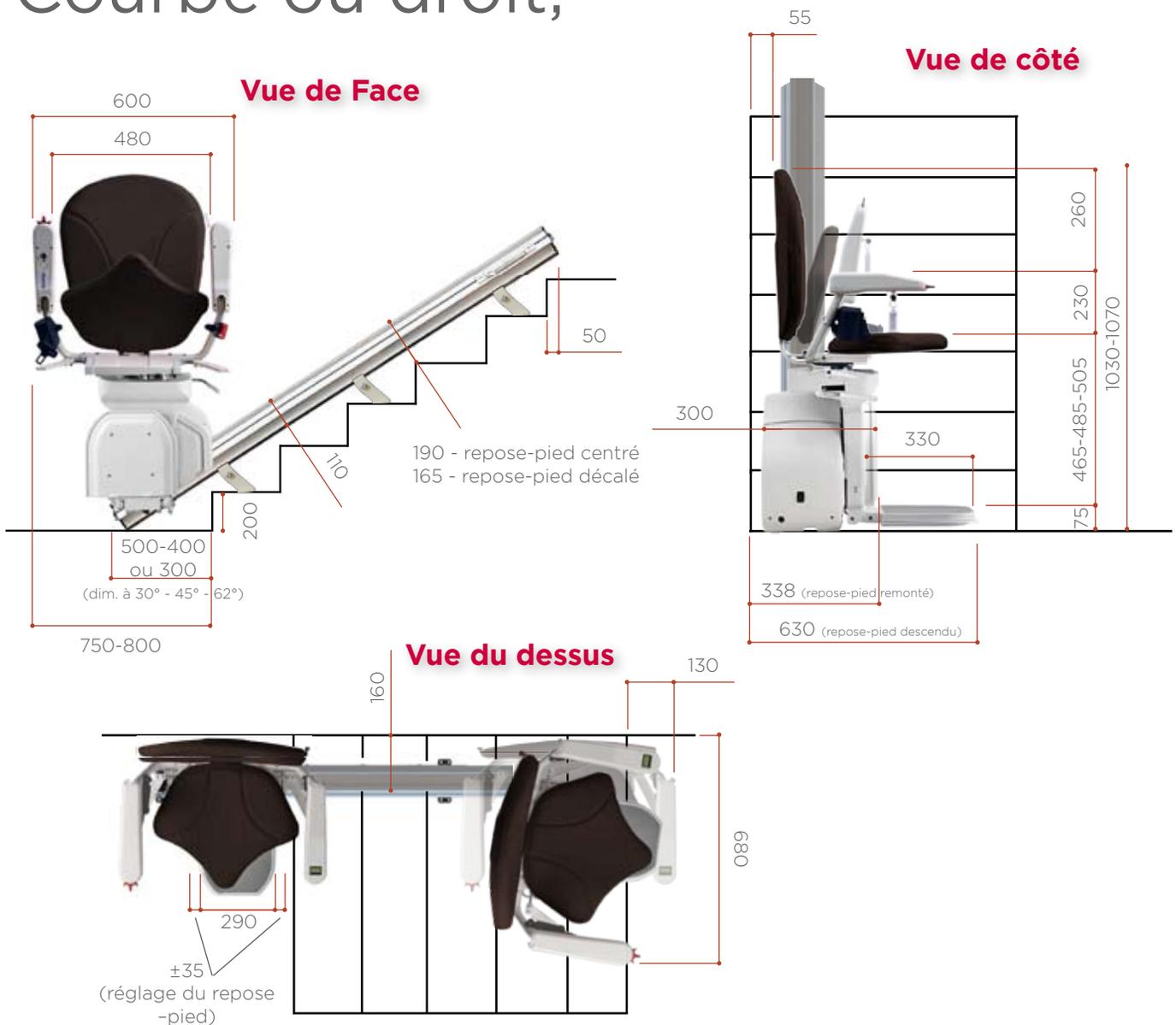

Alimentation	Batteries, 2 x 12 volts, consommation 0,014 kWh
Charge	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Vitesse	0,12 m/sec.
Cablage	Interne avec des points de charge aux bouts des rails
Fabrication	Rail unique en aluminium anodisé
Accroche	Accroche sur poteaux télescopiques.
Mouvement	Crémaillère et pinion avec contrôle OSG
Diagnostic	Intégré dans l'accoudoir, mémoire interne et diagnostic d'opération
Angle des rails	25 - 62° max
Moteur	Alimenté par batterie 0,26 kW
Garantie	24 mois
Capacité	140 kg



# Le fauteuil est toujours ERGO.

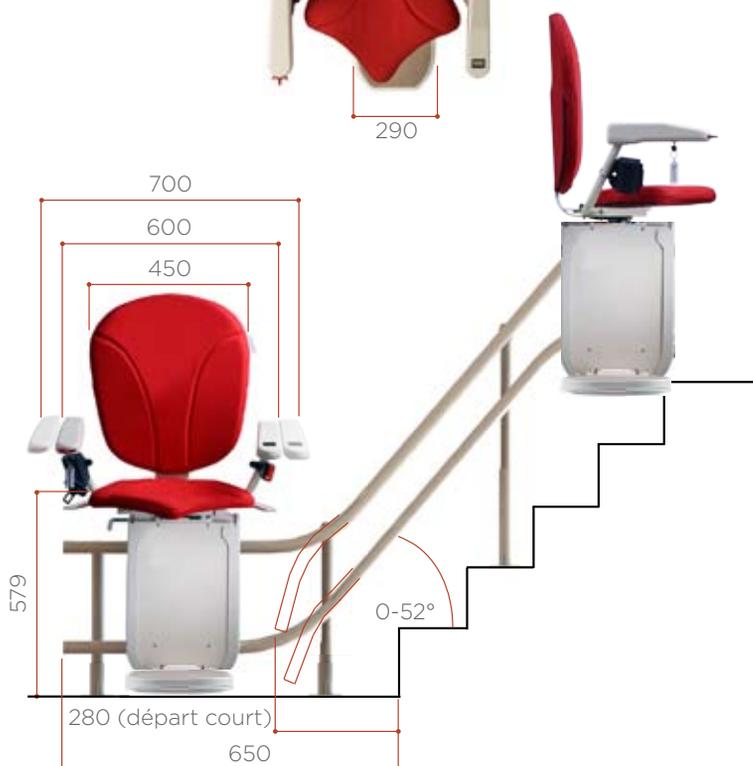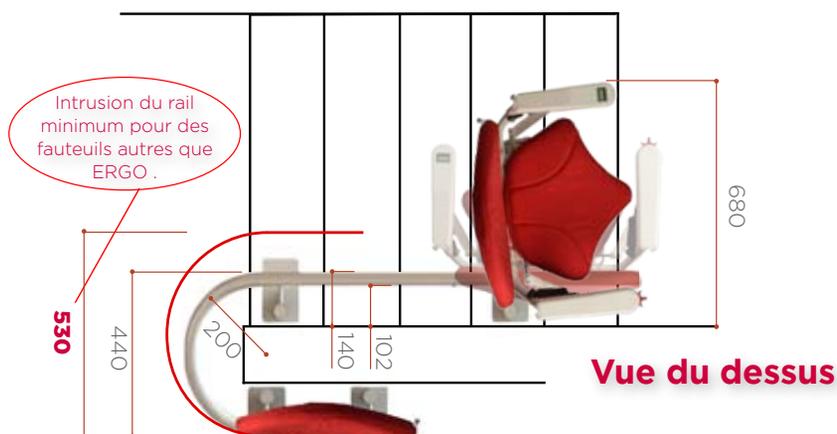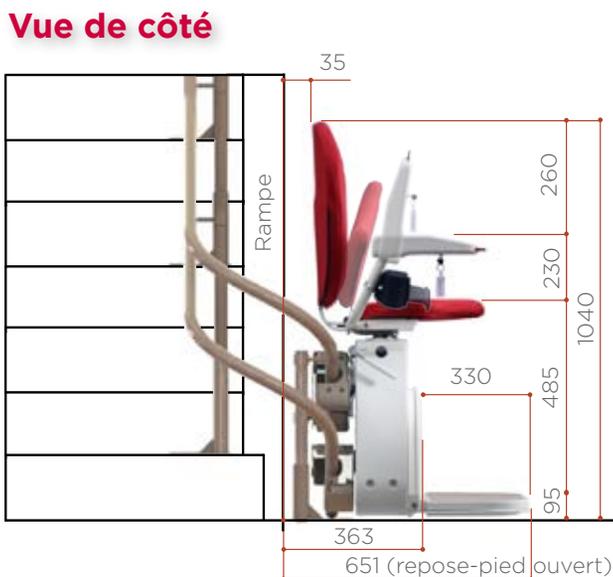

Alimentation	Batteries, 2 x 12 volts, consommation 0,014 kWh
Charge	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Vitesse	0,12 m/sec. réglable électroniquement
Cablage	Interne avec des points de charge aux bouts des rails
Fabrication	2 tubes en acier de 38 mm de diamètre, avec un rayon de virage de 200 mm
Accroche	Accroche sur poteaux télescopiques.
Mouvement	Crémaillère et pinion avec contrôle OSG
Diagnostic	Intégré dans l'accoudeur, mémoire interne et diagnostic d'opération
Angle des rails	0 - 52° max
Moteur	Alimenté par batterie 0,26 kW
Garantie	24 mois
Capacité	120 kg (160 kg sur le modèle HD)

Les mesures, en millimètres, sont des valeurs nominales.  
Les spécifications peuvent varier en fonction des dimensions de l'escalier.  
Les manuels d'utilisation sont fournis avec chaque appareil.

C'est pour cela  
que nous  
avons choisi  
**Platinum.**

Appelez nous dès maintenant



[www.platinumstairlifts.com](http://www.platinumstairlifts.com)  
[enquiries@platinumstairlifts.com](mailto:enquiries@platinumstairlifts.com)



  
**platinum**  
STAIRLIFTS